

3M ESPE

アドパー™ イージー ボンド セルフエッチ アドヒーシブ

お試しキャンペーン

期間：2010年
3月1日～4月30日

歯科用接着材アドパー™ イージー ボンド セルフエッチ アドヒーシブを
今なら、お求めやすいお試しボトル1.5mL 3,000円でご提供いたします。
この機会に是非、お試しください。(期間・数量限定)

製品番号:41253C

キャンペーン特別希望医院価格!

¥3,000

さらに **ボンディング材
保管ケース付き**



1.5mL



5mL

アドパー™
イージー ボンド
セルフエッチ アドヒーシブ
41246 (5mL) も好評発売中



※ボトルが横倒しになると、液ダレを起こす恐れがあるため、保管ケース等のご利用をおすすめします。

※写真はイメージです。保管ケースには製品と付属品は含まれません。


※保管ケース素材:プラスチック。しきり板(可動)2枚。

3M ESPE

Q: どうして1液性なのに**安心**して使えるの?

A.1 安定した高い接着力

エナメル質と象牙質ともに接着力が高く、その差が少ないため安定しています。

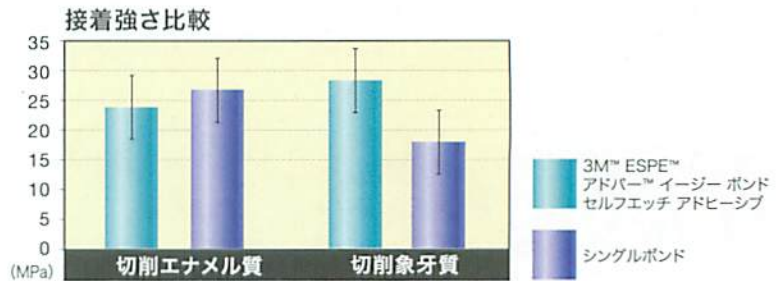

データ提供：日本歯科大学生命歯学部歯科保存学講座

A.2 光の届きにくい窩洞でも確実に硬化



口腔内の過酷な状態も考えて複数の重合開始剤をバランスよく配合しました。

A.3 最後の1滴まで物性が安定

3Mの分散技術がフィラーの沈殿を防ぐため、使用前に**ボトルを振る必要がありません。**

分離しないので振らずにそのまま使用できます。

レジンと溶媒、フィラーが均一に分散している

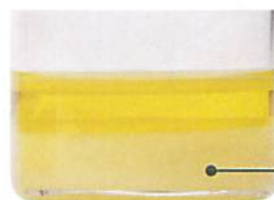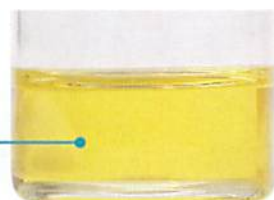


分離する製品は使用することにより振ります。

フィラーが沈殿している



A.4 被膜が薄く(約10μm) 審美的

被膜が約10μmと薄いため、審美的な治療が行なえます。

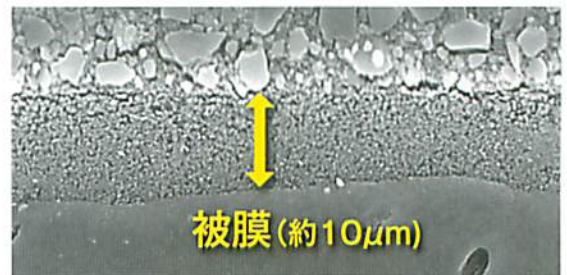

写真提供：東京医科歯科大学 大学院歯学総合研究所 口腔歯学分野

A.5 滴下後30分間使用可能 ※遮光した場合

揮発性の低い水とエタノールを溶媒としています。

お申し込み書

アドバー™ イージー ボンド セルフエッチ アドヒーシブ お試しボトル (1.5mL 1本) ※保管ケース付き	製品番号 41253C	申し込み数量 個
貴医院名	お取引器材店 株式会社 歯電大歯科	
ご住所 〒		
TEL ()		

器材店様におかれましては、個人情報のお取り扱いにご配慮くださいますようお願いいたします。

販売名: アドバー™ イージー ボンド セルフエッチ アドヒーシブ
認証番号: 220AKBZX00113000

3M ESPE

スリーエム ヘルスケア株式会社
歯科用製品事業部

〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

3M, ESPE, アドバーは、3M社またはその関連会社の商標です。
希望医院価格は本体価格です。

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2010. All rights reserved
DEN-673-A(021070)IT

当事業部取扱製品のお問い合わせは
3M ESPE コールセンター

0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-3709-9739をご利用ください。

セメント使い分け キャンペーン

実施期間：2010年 3月1日(月)～4月30日(金)

今なら、お得な ビトレマー™ ペースト ジャンボパックと
 歯科接着用セメント リライエックス™ ユニセム クリッカー™ A2ユニバーサル (2.5g) と、
 シリコンパッド (3枚) がセットになって、さらにお得!!

ジャンボパック (5本入) は
 トライアルパック (1本入) × 5箱 と比べ
6,500円もお得!

インレー 400症例、クラウン200症例
 使用可能!!



期間中
 これがセットで
 さらにお得!

高い接着力が必要な場合やジルコニア、
 オールセラミックス、ハイブリッドレジンなどの
 審美補綴物に適した歯科接着用レジンセメントです!

リライエックス™ ユニセム
 クリッカー™ A2ユニバーサル
 (2.5g)



シリコンパッド (3枚) セメンティングマニュアル (1冊)

ビトレマー™ ペースト セメント使い分け キャンペーン セット内容

- ビトレマー™ ペースト ジャンボパック×1箱
 ビトレマー™ ペースト クリッカー™ ディスペンサー (11g) ×5本
 練和紙 ×2冊
- リライエックス™ ユニセム クリッカー™ A2 ユニバーサル×1箱
 リライエックス™ ユニセム クリッカー™ ディスペンサー (2.5g) ×1本
- シリコンパッド×3枚 ■セメンティングマニュアル×1冊

通常希望医院価格 合計 ~~¥34,690~~ (相当)

キャンペーン
 特別希望医院価格

¥27,500

製品番号: 3525JBU

3M ESPE

●詳しくはお取引の器材店にお問い合わせ下さい。
 ●予定数量に達した場合には期間中でも終了することがございますので、あらかじめご了承ください。

合着

セメント使い分けのご案内

接着

ビトレマー™ ペーストと、リライエックス™ ユニセム クリッカー™ は、同型のクリッカー™ 仕様です。術式も簡単で同一、余剰セメントの除去・最終硬化の時間（化学重合）も同様で、使い分けが容易です。

メタル、もしくはメタルの裏打ちあり

- メタルクラウン
- メタルインレー
- 陶材焼付鑄造冠 (MB)
- 硬質レジン前装冠
- メタルコア

同一術式で簡単に使い分けできます。



ビトレマー™ ペースト
合着用グラスアイオノマー系
レジンセメント

メタルの裏打ちなし 歯冠長が短い

- ジルコニア
- オールセラミックス
- ポーセレンインレー・アンレー
- ハイブリッドレジン
- レジンジャケット冠
- ファイバーコア
- レジンコア



リライエックス™
ユニセム クリッカー™
歯科接着用レジンセメント

日常の合着にご使用下さい。

ハイブリッドレジン、オールセラミックス、ポーセレンなどの審美補綴物は審美性、接着の良否、理工学的な強度が破折と関係しているため使用できません。

※ジルコニアの症例では支台歯へのフィットが良く、セメントの色の影響を受けない場合に、ご使用いただけます。

高い接着力が必要な場合にご使用ください。 (ビトレマー™ ペーストを使用できる症例にも使用できます。)

練和直後は高い親水性を有し、水分を含む歯質とのなじみが良くなります。硬化後は疎水性になり長期に安定します。

※ポーセレンの内面にはセラミック プライマーの併用をお勧めいたします。



販売名:ビトレマー™ ペースト
認証番号:218AKBZX00113000

販売名:シリコンパッド
届出番号:14B1X00010000115

販売名:リライエックス™ ユニセム クリッカー™
認証番号:219AKBZX00195000

3M, ESPE, ビトレマー, Vitremer, リライエックス, RelyX, クリッカーは3M社またはその関連会社の商標です。希望医院価格はすべて本体価格です。

3M ESPE

スリーエムヘルスケア株式会社
歯科用製品事業部

〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/hc/dental>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2010. All rights reserved
DEN-674-A(021070)IT

当事業部取扱製品のお問い合わせは
3M ESPE コールセンター

0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-3709-9739をご利用ください。

シンフォニー™ 歯冠修復用マイクロハイブリッドレジン

期間:2010年4月1日(木)~6月30日(水)

シンフォニー™製品 スプリングキャンペーン



シンフォニー™ 技工用レジン
オペカーパウダー A3
オペカーリキッド

シンフォニー™ 技工用レジン
ペースト全10色



ロカテック™ ジュニア

ロカテック™ サンド プラス

エスペ™ ジル



専用真空ポンプ

ビジオ™ ベータ バリオ真空光重合器
(50Hz/60Hz)

キャンペーン内容

- ① シンフォニー™ 技工用レジン ペースト全10色
DA2/DA3/DA3.5/E2/E3/T1/D01/I3/I5/I7
通常希望医院価格 5,030円
認証番号:219AKBX00072000
- ② シンフォニー™ 技工用レジン ハンドピース
通常希望医院価格 2,500円
- ③ シンフォニー™ 技工用レジン オペカーパウダー A3
通常希望医院価格 3,750円
認証番号:219AKBX00072000
- ④ シンフォニー™ 技工用レジン オペカーリキッド
通常希望医院価格 3,750円
認証番号:219AKBX00072000
- ⑤ ロカテック™ ジュニア
通常希望医院価格 216,000円
届出番号:14B1X00010000217
- ⑥ ロカテック™ サンド プラス(110μm)
通常希望医院価格 34,300円
届出番号:14B1X00010000206
- ⑦ エスペ™ ジル シランカップリング材
通常希望医院価格 23,000円
認証番号:21100BZY00526000
- ⑧ ビジオ™ ベータ バリオ真空光重合器(50Hz/60Hz)
通常希望医院価格 384,000円
届出番号:14B1X00010000201
- ⑨ 専用真空ポンプ
通常希望医院価格 130,000円

**16%
OFF**

キャンペーン内容

通常希望医院価格 ~~826,900円~~ (本体価格)

製品番号:49000EA/50Hz・49000WA/60Hz

キャンペーン
特別希望医院価格 **690,000円**

詳しくはお取引の器材店、またはスリーエムヘルスケア株式会社各支店・営業所お問い合わせください。
数量限定ですので品切れの際はご容赦下さい。


シンフォニーTM 歯冠修復用マイクロハイブリッドレジン



ペーストを交ぜることで好みのシェードを作ることができます。

より透明度の高い仕上がりと卓越した色

- ◎磁器のような乳白色のオパール効果と蛍光性がエナメル質の自然美を再現できます。
- ◎デュアルキュア型のオペカーは光の届きにくい部分を化学重合により硬化します。

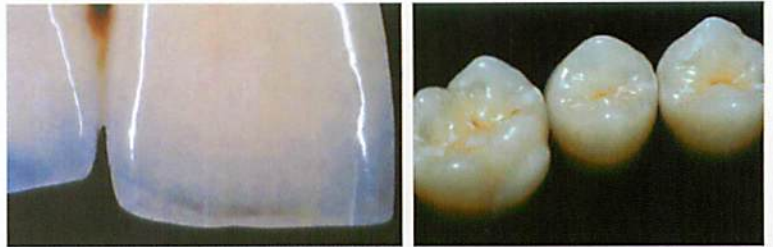


レジンでは難しかった、透明感のある自然な仕上がりです。

ロカテックTM 歯科用アブレイブ研削材



1cmの距離から、2.8気圧で噴射します。

◆症例写真

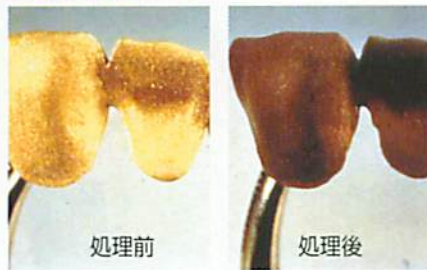

処理前

処理後

ロカテックTM サンドブラスターによる処理はリテンションビーズが不用で、確実、強固に接着できます。

- ◎金属・ポーセレンの表面の接着を強化するシステムです。
- ◎プレシャスメタル、アルミナセラミック、ジルコニアセラミックの表面処理に効果的です。
- ※症例によってはリテンションビーズとの併用が必要な場合があります。

処理面は目で見て確認できます。
※セラミックは変色しません。

ビジオTM ベータ バリオ 技工用光重合器



ビジオTM ベータ バリオ 高い真空状態での最終重合用ライト

- ◎波長域400~550nmのライトと、高い真空状態で最終重合しますので、未重合や低重合はありません。
- ◎他の材料にも応用できます。



※メタルフレームとレジンの接着面にストレスを与えません。

販売名:ロカテック ジュニア 届出番号:14B1X00010000217 / 販売名:ロカテック サンド 届出番号:14B1X00010000206
 販売名:ビジオ ベータ バリオ 真空光重合器 届出番号:14B1X00010000201 / 販売名:エスベジル 届出番号:21100BZY00526000
 シンフォニー各種 届出番号:219AKBZX00072000 販売名:シンフォニーTM 一般的名称:歯冠用硬質レジン 製造販売業者:スリーエムヘルスケア株式会社 住所:神奈川県相模原市南橋本3-8-8

3M, ESPE, Sinfony, Rocatec, Visio, シンフォニー, リライエックス, ビジオ, ロカテック, エスベ, は3M社またはその関連会社の商標です。

3M ESPE

スリーエムヘルスケア株式会社
 歯科用製品事業部
 〒158-8583
 東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/hc/dental>

Please Recycle. Printed in Japan
 © 3M 2009. All rights reserved
 DEN-683-A(031020)IT

当事業部取扱製品のお問い合わせは
 3M ESPE コールセンター
0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)
 ※フリーダイヤルが繋がらない場合は、
 03-3709-7739をご利用ください。